

Cavex Alginate Mixer 3

Protocole

Cavex Holland BV
Fustweg 5
2031 CJ Haarlem
Pays-Bas
T +31 23 530 77 00
dental@cavex.nl
www.cavex.nl



1. Mettez la bonne dose d'alginate et d'eau dans le gobelet de mélange.



2. Pré-mélangez brièvement pour pouvoir nettoyer le gobelet plus facilement et préserver le mixeur.



3. Fermez bien le gobelet en vissant le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre.



4. Placez le gobelet dans le mixeur et fermez le couvercle.



5. Sélectionnez programme, pressez Start et attendez la fin du programme.



6. Retirez le mélange d'alginate du gobelet en un seul geste et appliquez-le dans la gouttière.


Entretien et nettoyage de Cavex Alginate Mixer 3:

Évitez l'encrassement du mixeur en le nettoyant régulièrement. Lorsque la saleté se détache, elle peut se retrouver dans le moteur et l'endommager.


1. Dissolvez un peu de Cavex GreenClean dans un récipient d'eau.
2. Humidifiez légèrement un linge avec la solution GreenClean et nettoyez le mixeur.
3. Utilisez le bâtonnet mélangeur avec le linge humidifié pour nettoyer les endroits difficilement accessibles.



Dosage recommandé mâchoire supérieure

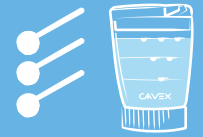

Dosage recommandé mâchoire inférieure

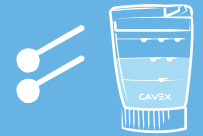

Accessoires

